

# **AXL (Gas6 Dependent)**

## **/BaF3**

### **CBP73249**

# 操作说明书



4008-750-250

## 目录

1. 背景信息 .....	1
2. 产品介绍 .....	1
3. 细胞基本信息 .....	2
4. 主要仪器试剂耗材 .....	2
5. 细胞培养 .....	3
5.1 细胞复苏 .....	3
5.2 细胞传代 .....	3
5.3 细胞冻存 .....	3
6. 细胞实验流程 .....	3
6.1 Anti-proliferation Assay .....	3
7. 数据展示 .....	5
7.1 增殖抑制实验验证结果 .....	5
8. 相关产品 .....	5

## 1. 背景信息

AXL 是受体酪氨酸激酶 TAM 的家族成员之一，该家族成员还包括 Mer 和 Tyro-3。Axl 大小约 140 kD(1 D=1 u)的跨膜分子，定位于 19q13.1，全长 42185 kb，由 698 个腺嘌呤，972 个胞嘧啶，931 个鸟嘌呤和 626 个胸腺嘧啶构成，有 20 个外显子。由胞外区、胞内区和跨膜区 3 部分组成，胞外区为结合配体的结构域，与神经细胞黏附分子结构相似，由 2 个免疫球蛋白(Ig) 样的结构域和两个纤维连接蛋白III(FNIII) 重复序列相连；胞内区为酪氨酸激酶结构域，具有自身磷酸化的特点，包含该家族特有的 KWIAIES 序列；以及跨膜区，参与细胞增殖、凋亡；细胞黏附与转移、血液凝固的稳定性以及调节炎症因子释放等作用。AXL 及其主要配体 GAS6 在许多恶性肿瘤中均存在高表达，GAS6 诱导 AXL 二聚化后，AXL 受体胞内发生自身磷酸化，激活 AXL 受体自身酪氨酸蛋白酶活性，催化下游信号转导，包括 JAK-STAT、PI3K-AKT 和 RAS-RAF-MEK-ERK 通路，促进肿瘤细胞存活、增殖、迁移、侵袭、血管生成和免疫逃避等。

## 2. 产品介绍

科佰生物推出 AXL (Gas6 Dependent)/BaF3 药靶细胞，其通过慢病毒转染的方法引入 AXL 基因到 BaF3 细胞系中，稳定表达人野生型 AXL (Gas6 Dependent)基因。见图 1 流式验证 AXL (Gas6 Dependent)表达。

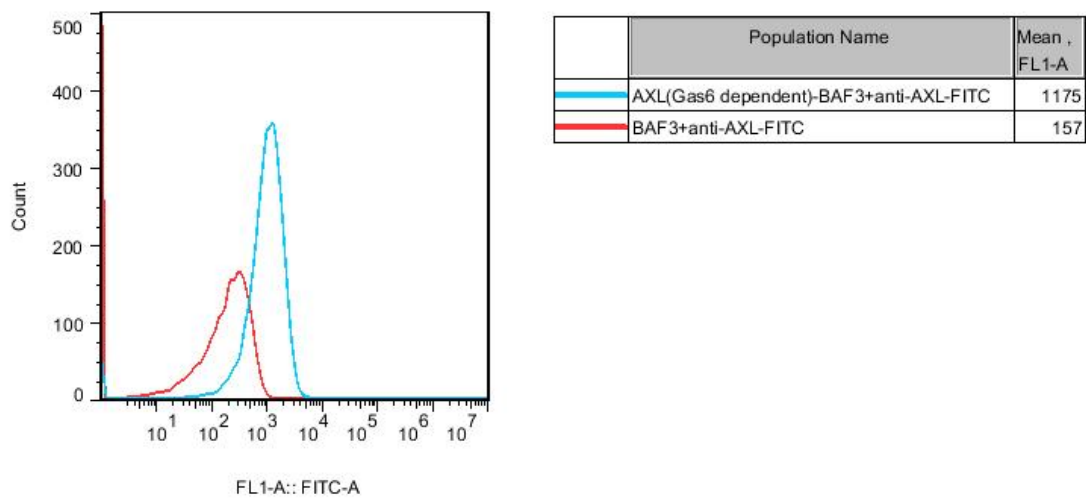


图 1: AXL (Gas6 Dependent)/BaF3 细胞表达人 AXL

Ba/F3（小鼠原 B 细胞）的生长和增殖需要 IL-3 的维持。引入各种表达激酶基因，这些基因能作为 Ba/F3 的驱动基因，让 Ba/F3 不再依赖 IL-3 而增殖，进而激酶基因成为 Ba/F3 增殖依赖的驱动基因，用于评估小分子药物对激酶的靶向抑制作用。

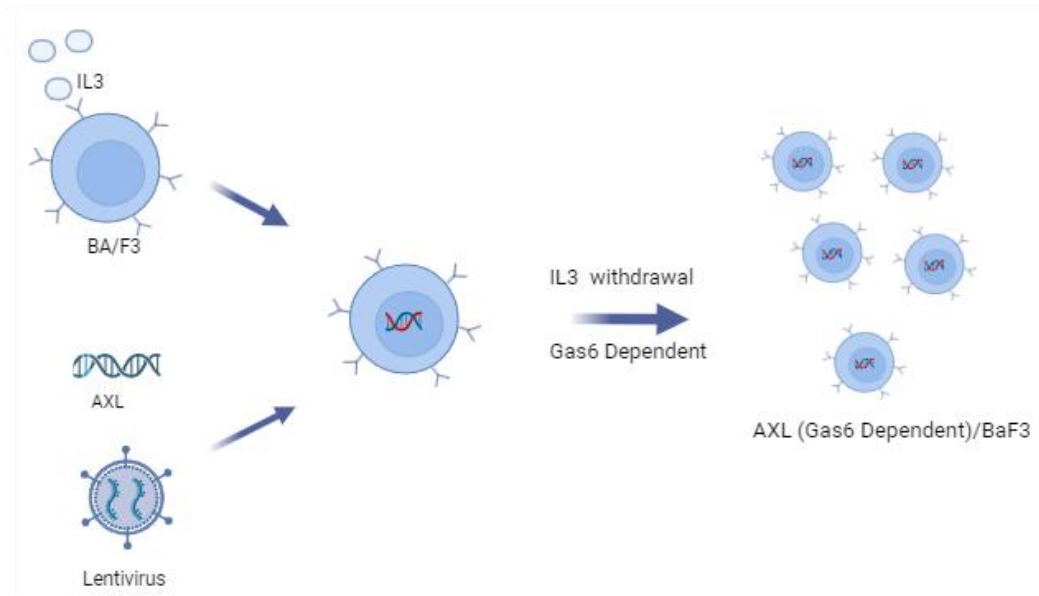


图 2: AXL (Gas6 Dependent)/BaF3 细胞构建流程

### 3. 细胞基本信息

母细胞: Ba/F3

表达基因: AXL (Gas6 Dependent)

传代培养基: RPMI-1640+10%FBS+1ug/ml Human Gas6

细胞冻存液: 90% FBS+10% DMSO

细胞形态: 悬浮

支原体检测: 阴性

稳定性: 16 代 (室内测试结果, 不表示超过 16 代以上不稳定)

保存条件: 液氮保存

### 4. 主要仪器试剂耗材

名称	品牌	货号
AXL (Gas6 Dependent)/BaF3 完全培养基	Cobioer	CBP73249M
细胞冻存液	Cobioer	CBP50089
96 Well Assay Plate (White Plate, Clear Bottom with Lid Tissue Culture Treated Polystyrene 1/Pack)	Costar	3610
Recombinant Human Gas6 Protein	R&D	885-GSB-050

细胞活力检测试剂盒	Cobioer	CBPH0004
-----------	---------	----------

## 5. 细胞培养

### 5.1 细胞复苏

- 1) 在 37°C 水浴中快速融化细胞约 60 秒。一旦细胞解冻（可能比 60 秒稍快或稍慢），快速将冻存管中的细胞吸入装有 10 ml 预热 AXL (Gas6 Dependent)/BaF3 完全培养基的 15 ml 离心管中。
- 2) 1000 转、5 分钟离心细胞，除去培养基并将细胞重悬于 5 ml 预热的完全培养基中。
- 3) 调整细胞密度到  $3-6 \times 10^5$  cells/ml，加入 T25 培养瓶中，放入 37°C、5% CO<sub>2</sub> 培养箱中。

### 5.2 细胞传代

每 1-2 天取细胞悬液计数，当密度大于  $2 \times 10^6$  cells/ml 时,请及时传代或补加新鲜完全培养基。保持细胞密度在  $3 \times 10^5 - 2 \times 10^6$  cells/ml 之间。

### 5.3 细胞冻存

取  $8 \times 10^6$  细胞离心后弃上清。加 1ml 细胞冻存液(90% FBS+10%DMSO)，吹打均匀，加入细胞冻存管。立即放入细胞冻存盒（Nalgene 5100-0001），加异丙醇到刻度线，放-80°C 冰箱。24 小时后将冻存管转到液氮中长期保存。

## 6. 细胞实验流程

### 6.1 Anti-proliferation Assay

此实验由药靶细胞 AXL (Gas6 Dependent)/BaF3 细胞,Cat. # CBP73249 开展，本实验使用 BGB324、TP-0903、Gilteritinib 为测试样本，验证本模型的生物功能。

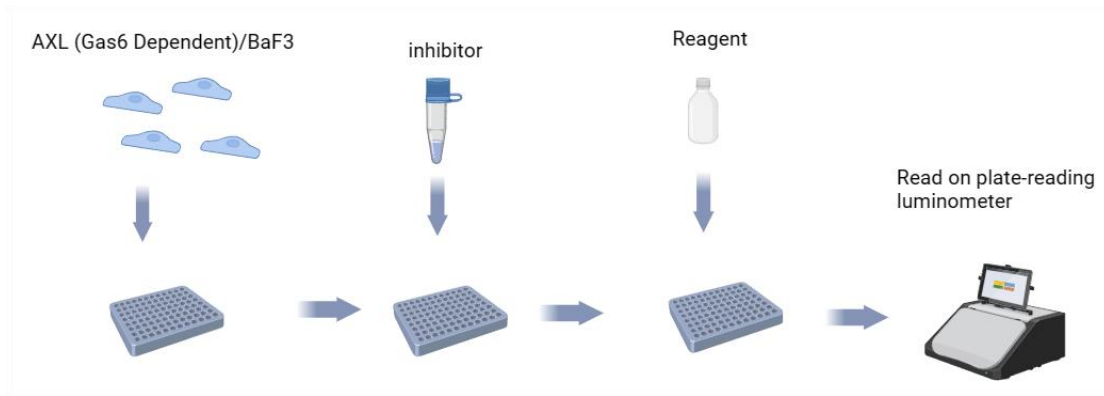


图 3: AXL (Gas6 Dependent)/BaF3 增殖抑制实验流程示意图

- 1) 取对数生长的细胞，离心弃培养上清，将离心下来的细胞重悬于新鲜 RPMI1640+ 250 ng/ml GAS6+10%FBS 培养基中，细胞密度为  $5 \times 10^4$ /ml。
- 2) 将重悬的细胞接种到白壁透明底的 96 孔细胞培养板中，100ul/孔细胞悬液，接种两块培养板，放置 37 度细胞培养箱 4 小时。
- 3) 取出其中一块接种细胞的 96 孔板，加入 100ul/孔细胞活力检测试剂放置 30 分钟，读取数值，定义为 G0 数据。
- 4) 取另一块平行板，加入梯度稀释的  $10^*$  浓度化合物 11.1 ul/孔，化合物从 10uM (96 孔板内  $1^*$  最终浓度) 开始，3 倍稀释 9 个浓度梯度，并另外设置 DMSO 对照孔，继续在 37°C 细胞培养箱培养 72 小时。
- 5) 将化合物处理过 72 小时的 96 孔板从培养箱中取出，加入 100ul/孔细胞活力检测试剂放置 30 分钟，读取数值，定义为 G3 数据。
- 6) 根据以下公式计算每个孔对应的细胞增殖率：
$$\text{Proliferation\%} = \frac{(\text{待测化合物孔 G3} - \text{G0 平均值})}{(\text{DMSO 对照孔 G3 平均值} - \text{G0 平均值})} * 100$$
- 7) 根据每个梯度浓度孔对应的增殖率和其浓度，利用 Prism Graphpad 软件拟合细胞增殖的梯度曲线，并且计算化合物的 GI50 (GI50 定义为细胞增殖率为 50% 时对应的化合物浓度)。

## 7. 数据展示

### 7.1 增殖抑制实验验证结果

#### CTG Proliferation Assay of BaF3 AXL (Gas6 Dependent, Clone 4)

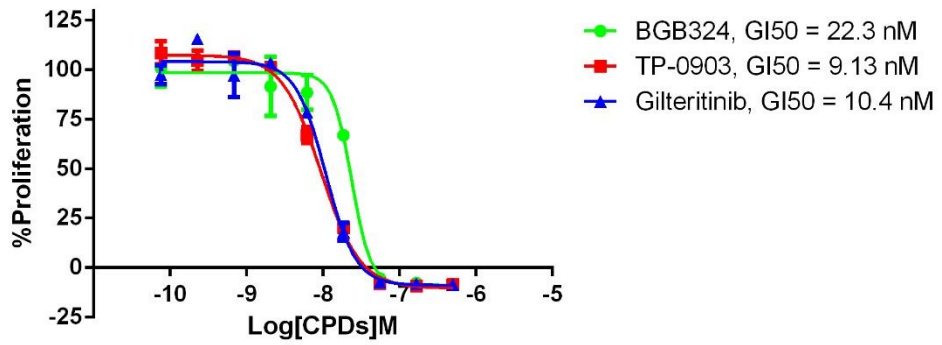


图 4: 使用 BGB324、TP-0903、Gilteritinib 增殖抑制实验结果

## 8. 相关产品

AXL (Gas6 Dependent)/BaF3	CBP73249
AXL-MBIP/BaF3	CBP73274